


Export Advance™

CATÉTER DE ASPIRACIÓN

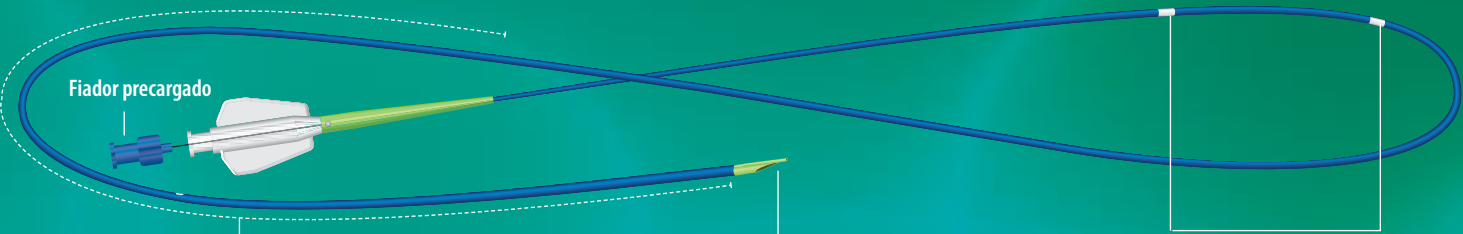

El recubrimiento hidrofílico de 38 cm reduce la fricción y garantiza un avance más suave a través de vasos difíciles

La marca radiopaca de la punta permite una visualización distal excepcional para el emplazamiento preciso del dispositivo

Las marcas proximales situadas a 90 cm y 100 cm indican el punto en el que el catéter de aspiración sale del catéter guía, minimizando la exposición radiológica

Referencia	Compatibilidad con catéter guía (pulg.)	Compatibilidad con guía (pulg.)	Longitud (cm)
ADVANCECE	Catéter guía de 6 F min. D.I. 0,070	0,014	140

Indicaciones de uso
El catéter de aspiración Export™ está indicado para su uso en el sistema circulatorio central y periférico, incluidos injertos de safena para:

- Contener y aspirar material embólico (trombos/residuos) durante la realización de angioplastia coronaria transluminal percutánea, angioplastia transluminal percutánea y/o procedimientos de implantación de stents, y
- La infusión o administración subselectivas de fluidos para diagnóstico o terapéuticos con o sin oclusión de vasos.

Información importante
Antes de usar, consulte las Instrucciones de Uso del producto suministradas con estos dispositivos para obtener información sobre las indicaciones, contraindicaciones, efectos secundarios, procedimiento recomendado, advertencias y precauciones.

Las marcas comerciales podrían estar registradas y son propiedad de sus respectivos propietarios. Para distribución exclusiva en mercados en los que el catéter de aspiración Export Advance™ está autorizado. Prohibida su distribución en los EE. UU., Japón o Francia.

© 2013 Medtronic, Inc. Quedan reservados todos los derechos.
Impreso en Europa. UC201305018ES 3/13


www.medtronic.com

Medtronic International Trading Sàrl. Route du Molliau 31 Case postale CH-1131 Tolochenaz www.medtronic.eu Teléfono: +41 (0)21 802 70 00 Telefax: +41 (0)21 802 79 00	Medtronic Ibérica S.A. Calle María de Portugal nº11 ES-28050 Madrid www.medtronic.es Teléfono: +34 91 625 04 00 Telefax: +34 91 650 74 10
--	---



Export Advance™

CATÉTER DE ASPIRACIÓN

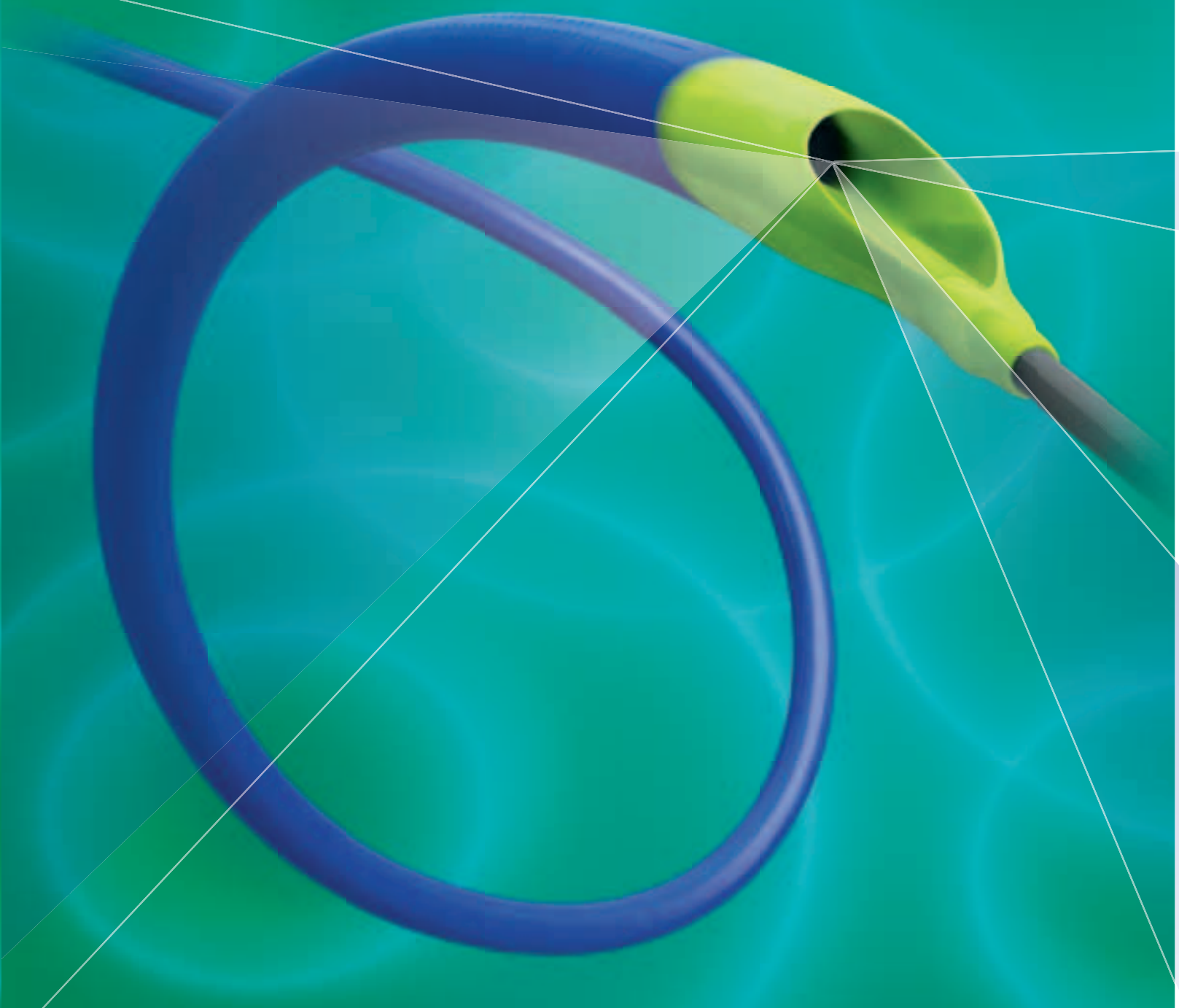

Advancing Performance

Export Advance™

CATÉTER DE ASPIRACIÓN

El catéter de aspiración Export Advance™ proporciona una capacidad de aspiración homogénea de alto rendimiento cuando más se necesita: para restaurar el flujo y proteger a los pacientes.

1 Excelente navegabilidad* y resistencia al acodamiento

Al combinar una tecnología innovadora con precisión y rendimiento, el catéter Export Advance proporciona seguridad en anatomías muy diversas.

El cuerpo del catéter, construido mediante la **Tecnología Full Wall** con mallado variable proporciona diferentes grados de firmeza sin juntas para conseguir un óptimo comportamiento del catéter

El **fiador precargado** facilita una liberación segura en la zona de aspiración deseada



- El fiador mejora la firmeza[†] del cuerpo durante el avance del catéter, aumentando la resistencia al acodamiento, la navegabilidad y el empuje

La **compatibilidad con una guía accesoria** permite un soporte adicional en los casos más exigentes, si fuese necesario

El fiador precargado facilita la navegabilidad



El mallado del cuerpo proximal mejora el empuje

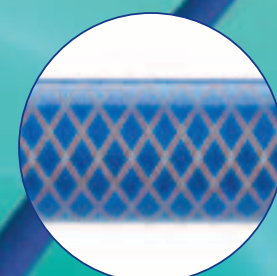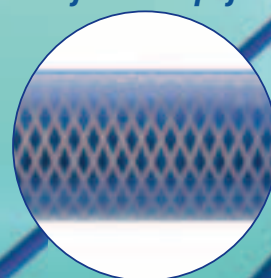


El mallado del cuerpo distal aumenta la flexibilidad

2 Óptima y segura capacidad de aspiración

Cuando cada segundo cuenta, el esmerado diseño del catéter Export Advance extrae el trombo con eficacia.

- El amplio lumen de aspiración (0,044" proximal; 0,043" distal) aumenta la capacidad de aspiración
- La geometría optimizada del conector proporciona un flujo mejorado
- El diseño de punta corta, suave y oblicua permite una excelente captura de partículas

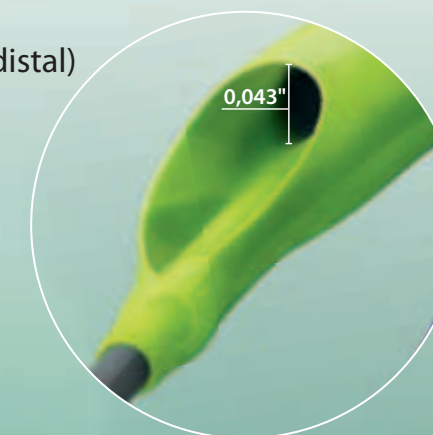

3 Más de 1.000.000 de pacientes tratados con Export™

Medtronic diseñó en 2003 el primer catéter de aspiración y continúa siendo el líder mundial.[‡]

La familia de catéteres de aspiración Export™ ha demostrado una reducción estadísticamente significativa de muertes cardíacas al año de seguimiento en pacientes con STEMI[§]



*Datos de archivo de Medtronic Inc. Basados en estudios comparativos.
†Basado en estudios en animales en los que se comparó con un catéter de aspiración Export™ AP sin fiador.
‡Datos de archivo de Medtronic Inc. Basados en los datos de ventas de 2003-2013.
§Vlaar PJ et al. Cardiac death and reinfarction after 1 year in the Thrombus Aspiration during Percutaneous coronary intervention in Acute myocardial infarction Study (TAPAS); a 1-year follow-up study. The Lancet. 2008;371:1915-1920. Análisis post hoc, sin ajuste para multiplicidad.